

BLOW

HQ
HIGH
QUALITY

Käsihierontalaite



HAND RELAX



**Nystyrä-
hieronta**



**Ilmatyyny-
hieronta**



**Kolme
hieronta-tilaa**



**Korkeataajuinen
tärinä**




**Kolme
voimakkuustasoa**



**Kuuma
kompresio**

ÄLYKÄS KÄSIHIERONTALAITE

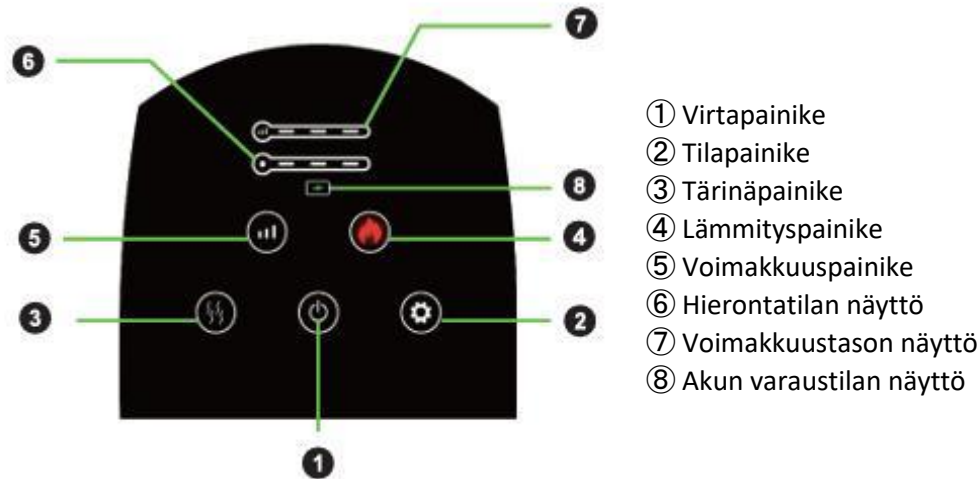

TUOTTEEN KÄYTTÖ

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään. Laite aloittaa toiminnan normaalilla hierontatilalla.
- Kytke tärinähieronta päälle tai pois päältä tärinäpainikkeella.
- Vaihda hierontatilaa painamalla tilapainiketta, jolloin laite selaa kolmea eri hierontatilaa ja merkkivalo vaihtuu sen mukaisesti.
- Käytä lämmitystoimintoa koskettamalla lämmityspainiketta laitteen ollessa päällä, jolloin lämmityksen punainen merkkivalo syttyy. Koskettamalla painiketta uudelleen lämmityksen merkkivalo sammuu ja lämmitys lakkaa.

TURVALLISUUSOHJEET

- Laitteen käyttö latauksen aikana on ehdottomasti kielletty.
- Rikkoontumisten välttämiseksi älä käytä koruja hieronnan aikana, jotta laitteen ilmatyyny ei vaurioidu.
- Palovammojen välttämiseksi älä käytä lämmitystoimintoa pitkiä aikoja kerrallaan, jotta iho ei altistu matalan lämpötilan palovammoille.
- Tehokkaampaa hoitoa varten voit levittää käsiisi käsivoidetta ja käyttää muovisia suojakäsineitä hieronnan aikana, mikä auttaa käsiäsi imemään enemmän ravinteita.
- Lataa akku täyteen heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta vältyt käynnistysongelmilta.
- Yli kahdeksanvuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai jos heille on annettu opastus laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai puhdistaa ja huoltaa sitä ilman valvontaa.